

Лист назначений для пациента стационара

“ Открытие назначений конкретного пациента происходит по нажатию на фиолетовую иконку в правом верхнем углу его бокса.

The screenshot shows a web application for scheduling appointments. At the top, there's a header bar with patient information: "Бокс 2 · ОРИТ", "Купер" (with a cat icon), "Мальтипу · 4 года 4 мес · 4.15 кг", "Степанова О. В.", and "Поступление 18.08.2026 09:45". Below this is a navigation bar with a date selector "18.08.2026", a "Сегодня" button, and buttons "Создать приём" and "Создать счёт".

The main area is a table with columns for "День", "Степень тяжести", "Врач (день)", "Врач (ночь)", "Ассистенты", and "Диагноз". The "Ассистенты" column is currently open, showing a list of names: "Петрова С.В.", "Смирнова Е.В.", "Иванов С.В.", "Лапшин М.Н.", "Михайлов И.В.", and "Морозова Т.В.". The table rows are categorized into "Разделы": "Мониторинг" (with sub-rows: АД ср, Температура, НАД, Сознание), "Витальные функции" (with sub-rows: Аппетит, Жажда, Рвота, Диурез, Темп диуреза, Дефекация, Моцион), and "Исследования" (with sub-rows: ОКА). The columns for time slots range from 00:00 to 19:00.

В верхней части страницы пациента отображаются:

- номер бокса
- отделение, например **ОРИТ** или **Анестезиологический стационар**
- вес пациента
- дата поступления
- день пребывания в стационаре
- дата назначений
- степень тяжести
- ответственные врачи и ассистенты
- диагноз

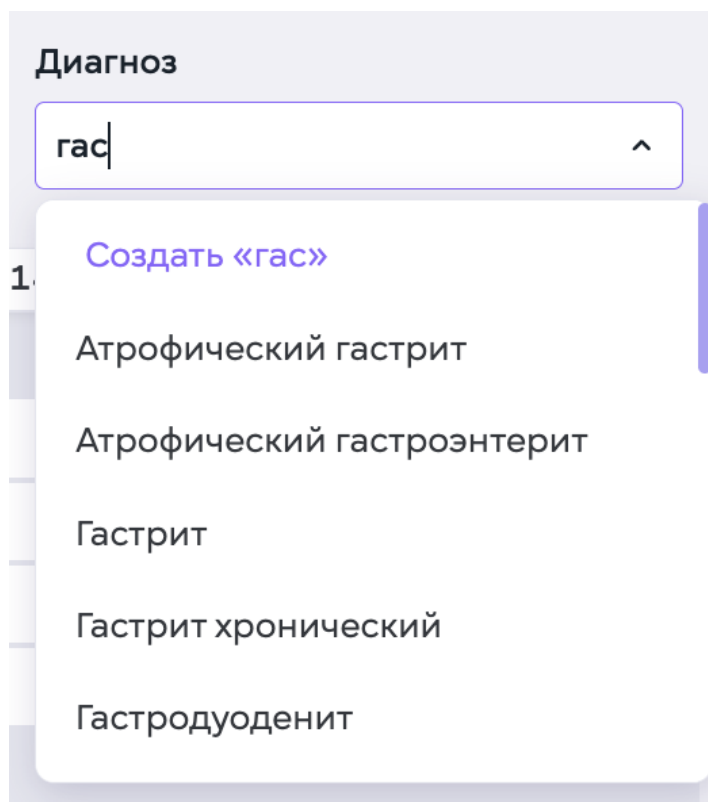
Для просмотра назначений за предыдущий или следующий день используйте стрелки рядом с датой.

1. Основные сведения о пациенте:

Степень тяжести - отображается в верхней части страницы. Для изменения нажмите на значение и выберите актуальный вариант.

Ответственные сотрудники - Выберите врачей и ассистентов, ответственных за пациента в текущую смену.

2. Выбор диагноза



Диагноз

гас ^

1. Создать «гас»

Атрофический гастрит

Атрофический гастроэнтерит

Гастрит

Гастрит хронический



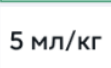
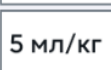
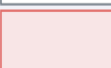
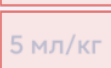
Гастродуоденит

Диагноз указывается непосредственно в карте стационарного пациента.

1. Нажмите на поле «**Диагноз**»
2. Начните вводить название диагноза
3. Выберите подходящий вариант из выпадающего списка
4. Если необходимого диагноза нет в справочнике, нажмите «**Создать „...“**»

После выбора диагноз будет сохранён в данных текущей госпитализации пациента.

3. Цветовые статусы назначений

	Пустая ячейка
	Наведение
	Выделенная ячейка
	Коментарий
	Назначение без комментария
	Коментарий в назначении
	Выполненная процедура без назначения
	Выполненное назначение без внесения данных
	Выполненное назначение с внесёнными данными
	Просроченное назначение без внесения данных
	Просроченное назначение с комментарием

Состояние назначения определяется по цвету ячейки:

- **прозрачная ячейка** — назначение выполнено
- **красная ячейка** — назначение просрочено
- **зелёная ячейка** — назначение запланировано на будущее

4. Разделы таблицы назначений

Таблица назначений может включать следующие разделы:

- **Мониторинг**
- **Исследования**
- **Препараты**
- **ИПС**
- дополнительные пользовательские разделы.

Внутри каждого раздела создаются отдельные строки с конкретными задачами или показателями.

Например, в раздел «**Мониторинг**» могут быть добавлены:

- температура
- частота сердечных сокращений


- частота дыхательных движений
- артериальное давление
- диурез

В раздел «**Препараты**» добавляются лекарственные средства с указанием дозировки, пути введения и расписания.

Порядок расположения строк доступен к пользовательским настройкам

The screenshot displays a veterinary management system interface. At the top, it shows the date "Среда 19 августа 2026 10:30" and the location "Филиал: НьюВетТех". Below this, there's a navigation sidebar on the left with various icons. The main area features a table with columns for time slots (08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00) and rows for patients. The patients listed include "Бокс 1 - ОРИТ", "NewName - Тестов Т.Т.", "1 - ОРИТ", "Мура - Варпанова А.Е.", "Бокс 2 - ОРИТ", "Купер - Степанова О.В.", "Бокс 3 - ОРИТ", "Филия - Сафонова Н.Е.", "Бокс 1 - ОРИТ", "Эскаб - Успенская Д.В.", "ОРИТ 4 - ОРИТ", "Барсик - Иванова И.И.", and "Анест - Хирургическ...". A hand cursor is pointing at the "Эскаб - Успенская Д.В." entry. The interface also includes a search bar, a filter button, and a "Добавить" (Add) button.

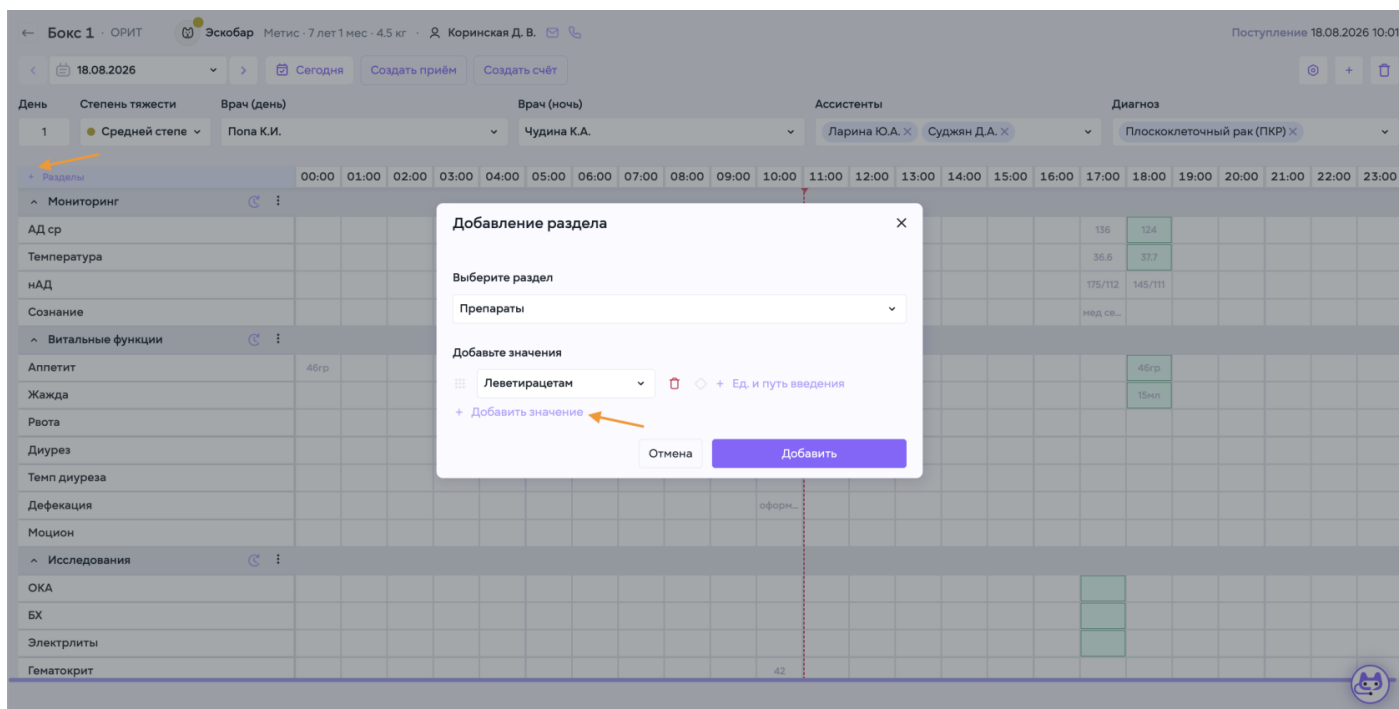5. Создание раздела и строк с назначениями



1. Создайте раздел кликну кнопку добавления в таблице назначений.
2. Добавьте в него необходимые строки. Каждая строка должна соответствовать отдельной задаче, процедуре, препарату или контролируемому показателю.
3. Сохраните по кнопке "Добавить"

Редактирование раздела и его строк доступно через кнопку с тремя точками в правом верхнем углу блока.

6. Установка назначения или фиксация данных

Назначения можно добавить точно, по клику на клетку с необходимым препаратом или измерением

1. Кликните на клетку в таблице
2. Внесите инструкцию, например дозировку или скорость инфузии
3. Галочка "Поставить" активна по умолчанию. При необходимости фиксации, например диуреза, снимите галочку.
4. Сохраните

🕒 10:00

✕

Инструкция

10 мл/ч

✕

Назначение

☒ Поставить

Длительность

12

^

↓

ч

Процедура

☐ Выполнена

Удалить

Очистить

Сохранить

7. Массовая установка ИПС

← Бокс 1 · ОРИТ

Эскобар

Метис · 7 лет 1 мес · 4.5 кг

Коринская Д. В.

Поступление 18.08.2026 10:01

18.08.2026

Сегодня

Создать приём

Создать счёт

День

Степень тяжести

Врач (день)

Врач (ночь)

Ассистенты

Диагноз

1

Средней степе

Попа К.И.

Чудина К.А.

Ларина Ю.А. ✕ Суджан Д.А. ✕

Плоскоклеточный рак (ПКР) ✕

Разделы

00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00

Рентген

Инфузия

Стерофундин

Натрия хлорид 0.9%

Натрия хлорид 7.2%

Рингер

Трисоль

Ацесоль

Дисоль

Глюкоза 5%

Глюкоза 10%

Глюкоза 20%

Глюкоза 40%

Цельная кровь

Свежезамороженная кровь

Эритроцитарная масса

Калия хлорид 4%

Магния сульфат

Настройка регулярности и длительности действий

✕

Инфузия

Длительность

Повторение каждые

Время начала

☒ Стерофундин

12

↑

↓

ч

☐ Натрия хлорид 0.9%

1

↑

↓

ч

☐ Натрия хлорид 7.2%

1

↑

↓

ч

☒ Рингер

8

↑

↓

ч

☐ Трисоль

1

↑

↓

ч

☐ Ацесоль

1

↑

↓

ч

☐ Дисоль

1

↑

↓

ч

☐ Глюкоза 5%

1

↑

↓

ч

☐ Глюкоза 10%

1

↑

↓

ч

☐ Глюкоза 20%

1

↑

↓

ч

☐ Глюкоза 40%

1

↑

↓

ч

☐ Цельная кровь

1

↑

↓

ч

☐ Свежезамороженная кровь

1

↑

↓

ч

☐ Эритроцитарная масса

1

↑

↓

ч

☐ Калия хлорид 4%

1

↑

↓

ч

↑

↓

ч

00:00

✕

00:00

✕

00:00

✕

00:00

✕

00:00

✕

00:00

✕

00:00

✕

00:00

✕

00:00

✕

00:00

✕

00:00

✕

00:00

✕

00:00

✕

00:00

✕

00:00

✕

00:00

✕

00:00

✕

00:00

✕

00:00

✕

00:00

✕

Отмена

Сохранить

80 мл / 12 ч

10 мл/ч

Для настройки расписание назначения:

1. Нажмите значок часов в правой части строки
2. Укажите продолжительность выполнения
3. Задайте частоту повторения
4. Выберите время начала назначения

5. Сохраните расписание

После сохранения назначение появится в соответствующих временных ячейках сетки. Для **добавления предварительного комментария** нажмите на нужную ячейку назначения и введите текст.

Такой комментарий используется как инструкция к выполнению. Он не переносится в медицинскую карту и удаляется после выполнения назначения.

Пятница 21 августа 2026 11:44

НьюВетТех/ЛДО

Ассистент Дневной

Бокс 1 · ОРВИ

Эскабар

Метис · 7 лет 2 мес · 4.5 кг · Коринская Д.В.

Поступление 18.08.2026 10:01

21.08.2026

Сегодня

Создать приём

Создать счёт

День

Степень тяжести

Врач (день)

Врач (ночь)

Ассистенты

Диагноз

4

Удовлетворите

Иванов С.В.

Смирнова Е.В.

Петрова С.В. · Волкова А.В.

Разделы

00:00

01:00

02:00

03:00

04:00

05:00

06:00

07:00

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

Витальные функции

Аппетит

Жажда

Рвота

Диурез

Темп диуреза

Дефекация

Исследования

ОКА

БХ

Электрлиты

Генотокрит

УЗИ

Рентген

Газы крови

Препараты

Анальгин

Единица

мл

Путь введения

в/в

Нефопан

Единица

мг/кг

Путь введения

в/м

Леветирацета

Единица

мг / кг / ч

Путь введения

в/в

Стерофундин

Единица

мл

Путь введения

в/в

Калия хлорид

Единица

мл

Путь введения

в/в

46 гр сам...

10 мл

46гр

15мл

46гр

15мл

42

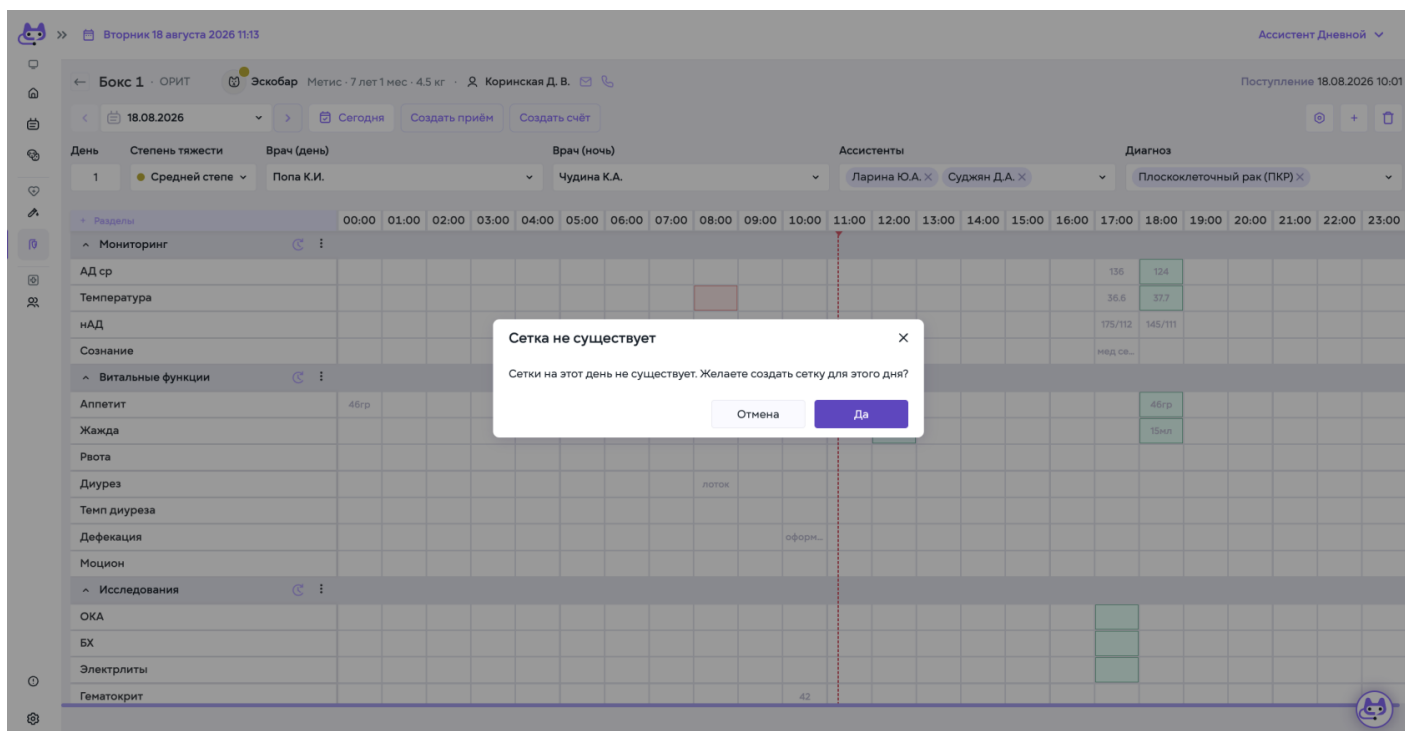
см карту

46гр


15мл

8. Выполнение назначений

Чтобы отметить назначение как выполненное, нажмите на соответствующую ячейку во временной сетке.



Создайте сетку по клику **"Да"**

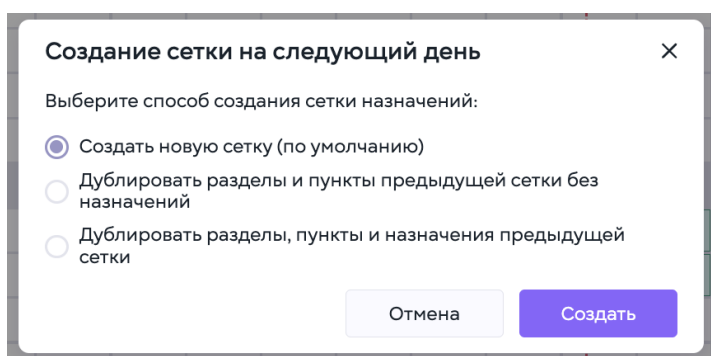

Выберите подходящий вариант для назначений следующего дня и отредактируйте его согласно состоянию пациента.

После копирования проверьте актуальность:

- препаратов и дозировок
- частоты выполнения
- времени процедур
- исследований
- параметров мониторинга.

При необходимости сетку нового дня можно удалить по клику на иконку корзины в правом верхнем углу экрана.

Вторник 18 августа 2026 13:04

Ассистент Дневной

Бокс 1 · ОРИТ

Эскобар

Метис · 7 лет 1 мес · 4.5 кг

Коринская Д. В.

Поступление 18.08.2026 10:01

19.08.2026

Сегодня

Создать приём

Создать счёт

День

Степень тяжести

Врач (день)

Врач (ночь)

Ассистенты

Диагноз

2

Тяжёлый

Выберите...

Выберите...

Выберите...

Выберите...

Разделы

00:00

01:00

02:00

03:00

04:00

05:00

06:00

07:00

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

Мониторинг

АД ср

Температура

НАД

Сознание

Витальные функции

Аппетит

Жажда

Рвота

Диурез

Темп диуреза

Дефекация

Исследования

ОКА

БХ

Электрлиты

Гематокрит

УЗИ

135

124

36.6

37.7

175/112

145/111

мед. се...

лоток

оформ...

слетев...

42

Связанные инструкции:

- 1. [Госпитализированные пациенты](#)
- 2. [Создание счета](#)
- 3. [Счета и платежи: все счета, выставленные на оплату](#)

Revision #14
Created 2026-07-30 00:10:49 UTC by Admin
Updated 2026-08-24 14:03:11 UTC by Admin