

Шаблоны лабораторных исследований

“ Шаблон исследования определяет, какие показатели будут заполняться при внесении результатов анализа.

Создание шаблона

метапетс

Склад

Товары и услуги

Финансы

Счета и платежи

Кассы

Клиентский сервис

Лиды

Звонки

Мониторинг и Аналитика

Дашборд

Сводка дня

Отчёты

Мед. статистика

Аудит медкарт

Клиника

Сотрудники

График работы

Доступы

Управление

Поддержка

Настройки

Среда 26 августа 2026 03:40

на Карамышевской/Терапия

Иван Петров

НастройкиСправочникиШаблоны

Поиск

+ Добавить

Шаблоны медкарт

Приёмы

Транскрибация


Лабораторные исследования

Приёмы


Название	Секция	Дата и время изменения	Статус
ОАК Собаки	Анамнез	26.08.2026 01:13	Активен
Анамнез (терапия)	Анамнез	25.08.2026 20:30	Активен
С-реактивный белок собак	Анамнез	25.08.2026 20:01	Активен
Терапия (осмотр)	Осмотр	25.08.2026 16:08	Активен
ОАК (кошки)	Анамнез	25.08.2026 14:41	Активен
Терапия (рекомендации)	Рекомендации	24.08.2026 20:14	Активен
Стоматология кошка	Осмотр	24.08.2026 17:43	Активен
Анестезиологическое сопровождение	Анамнез	24.08.2026 17:39	Активен
БХК (кошки)	Анамнез	24.08.2026 17:29	Активен
ПОВТОРНЫЙ ПРИЁМ - АНАМНЕЗ	Анамнез	24.08.2026 15:59	Активен

20 < 1 >

1. Перейдите в раздел «**Настройки**» → «**Шаблоны**».
2. Нажмите «**+Добавить**»
3. Укажите **наименование шаблона**
4. Выберите группу "Лаборатория"
5. По нажатию на + **Добавьте таблицу с референсами**

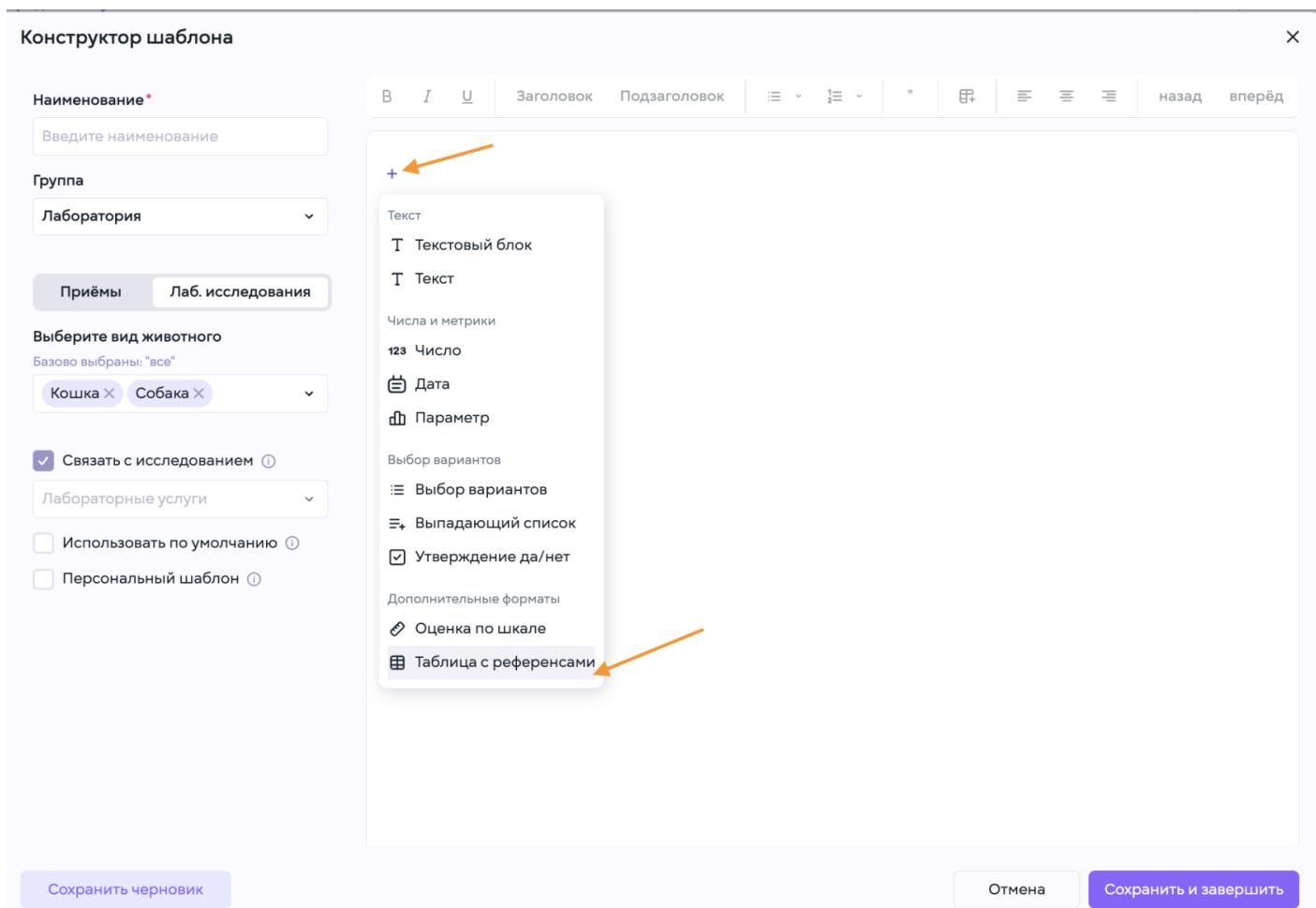

Добавление показателей

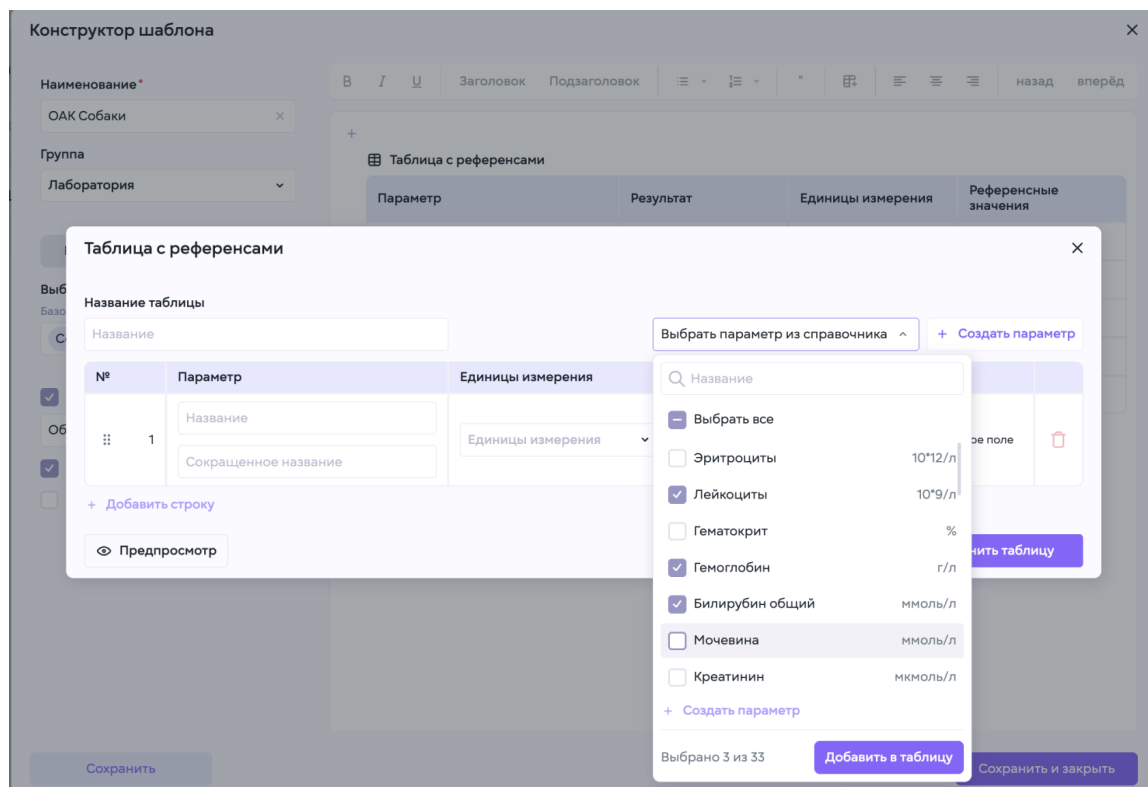

1. Нажмите «+ **Добавить строку**»
2. Добавьте необходимые показатели исследования
3. Для каждого показателя укажите:
 - наименование;
 - единицы измерения;
 - референсные значения.

Поле «**Результат**» будет заполняться при внесении результата исследования пациенту.

Каждый ранее созданный **показатель исследования лежит в справочнике** - удобно для формирования нового профиля стандартного исследования

Связь шаблона с исследованием

Конструктор шаблона

Наименование *

ОАК Собаки

Группа

Лаборатория

Приёмы

Лаб. исследования

Выберите вид животного

Базово выбраны: "все"

Собака

Привязать шаблон к конкретной лабораторной услуге

☒ Связать с исследованием

Общий клинический анализ кр...

☒ Использовать по умолчанию

☐ Персональный шаблон

Сохранить

В

I

U

Заголовок

Подзаголовок

≡

≡

*

≡

≡

≡

назад

вперёд

+

Таблица с референсами

Параметр	Результат	Единицы измерения	Референсные значения
Эритроциты (RBC)		10 ¹² /л	5.6 - 8.5
Лейкоциты (WBC)		10 ⁹ /л	5.05 - 16.7
Гемоглобин (HGB)		г/л	120 - 190
Гематокрит (HCT)		%	38 - 56
Тромбоциты (PLT)		10 ⁹ /л	160 - 550

+

Отмена

Сохранить и закрыть

1. Установите флажок «**Связать с исследованием**».
2. В появившемся списке выберите нужное исследование.

Например: «**С-реактивный белок**».

В списке отображаются услуги, которые в разделе «**Товары и услуги**» отмечены как «**Лабораторное исследование**».

Шаблон по умолчанию

1. Установите флажок «**Использовать по умолчанию**», если этот шаблон должен автоматически применяться для выбранного исследования.

При необходимости установите «**Персональный шаблон**», если он предназначен только для конкретного пользователя.

Связанные инструкции

1. Создание услуги
2. Создание шаблонов приема

Revision #4

Created 2026-07-30 05:30:41 UTC by Admin

Updated 2026-08-26 00:52:26 UTC by Admin